


**Etiketten Standardformate:
1 Keulenflasche
100/120 Stück Tücher-Spenderdose**

Multilayer

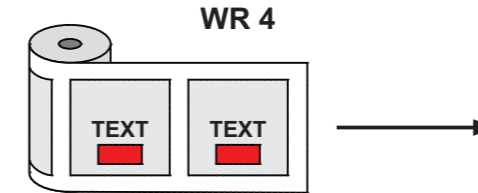

ETH-HST323010
250 x 110 mm
Bearbeitet: Tikvicki

■ Schwarz 29.01.2020
■ Pantone 185 C 29.01.2020

1 L Keulenflasche, Tücher-Spenderdose 100/120 Stück Multilayer
250 x 110 mm
Vorderseite (Außenseite)

auf einen Blick lesbarer Bereich: ca. 80 mm

Anschnitt

Stanzkontur

sicherer Textbereich

SAFE-ST SURFACE DISINFECTION

Rapid Surface Disinfection
Désinfectant à action rapide
Schnelldesinfektion

97-97729

GTIN(01)04059417000925

LOT

EXP:

1L e BAuA Reg.-Nr.: N-86478

DE Healthcare Products
DEDICATED TO EXCELLENCE

CB Healthcare Consulting GmbH
Am Neumarkt 34
22041 Hamburg, Germany
Tel: +49 40 656680
Rev. 2020/01

5°C 25°C

(EN) Rapid surface disinfection

Areas of application: Acc. to EU Medical Devices Regulation: Disinfection and cleaning of non-invasive alcohol-resistant medical devices. Acc. to Biocidal Products Regulation (BPR): quick disinfection and cleaning of alcohol-resistant surfaces of all kinds.

Spectrum of application and exposure time: Surface disinfection (wipe disinfection), bactericide, yeasticidal as per VAH/EN16615: 5 min.; tuberculocide (M. terrae): 30 sec.; active against enveloped viruses (including HBV, HIV, HCV): 30 sec., limited spectrum virucidal activity: 3 min., rotaviruses: 30 sec.; noroviruses (MNV): 1 min.; adeno viruses: 3 min.

Application: To ensure complete wetting apply the undiluted solution evenly on alcohol-resistant surfaces and keep them moist for the required contact time.
Composition: 100 g ready to use solution contains: 45 g ethanol (CAS: 64-17-5).

Warning: Flammable liquid and vapour. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Keep container tightly closed. Do not breathe vapour. Use only outdoors or in a wellventilated area. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Dispose of contents/container to approved disposal company or local collection.
For Professional Use Only.

(FR) Désinfectant de surfaces à action rapide

Champs d'application : Conformément à l'ordonnance sur les dispositifs médicaux : Désinfection et nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs résistants à l'alcool. Selon le Règlement sur les produits biocides (RPB) : désinfection rapide et nettoyage de surfaces de tous types résistants à l'alcool
Spectre et temps d'action : Désinfection des surfaces (désinfection par essuyage), bactéricide, levuricide selon VAH/EN16615 : 5 min. ; tuberculocide (M.terrae) : 30 s. ; efficace contre tous les virus enveloppés (inclus VHB, VIH, VHC) : 30 s. ; activité virucide à spectre limité : 3 min., rotavirus : 30 s. ; norovirus (MNV) : 1 min. ; adenovirus : 3 min.

Utilisation : Pour un mouillage complet, appliquer uniformément la solution non diluée sur des surfaces résistantes à l'alcool et la maintenir humide pendant toute la durée de l'exposition.

Composition : 100 g de solution prête à l'emploi contiennent : 45 g d'éthanol (CAS : 64-17-5).

Attention : Liquide et vapeurs inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient dans une entreprise de collecte agréée. Le type d'utilisateurs : professionnelle. BE Le numéro de tel du centre anti-poison : Centre Antipoisons +32 70 245 245

(DE) Schnelldesinfektion

Anwendungsgebiete: Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven, alkoholbeständigen Medizinprodukten.
Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten: Flächendesinfektion (Wischdesinfektion), bakterizid, levurozid gem. VAH/EN16615: 5 min.; tuberkulozid (M.terrae): 30 sec.; begrenzt viruzid (inklusive HBV, HIV, HCV): 30 sec., begrenzt viruzid PLUS: 3 min, Rota-Viren: 30 sec.; Noro-Viren (MNV): 1 min.; Adeno-Viren: 3 min.

Anwendung: Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Zusammensetzung: 100 g Tränkflüssigkeit enthalten: 45 g Ethanol (CAS: 64-17-5).

Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.
Nur für den professionellen Gebrauch.

EN: WARNING
FR: ATTENTION
DE: ACHTUNG



ETH-HST323010